


Federarm (1240 mm)

Kardanische Aufhängung

Monitorträger

für große Bildschirme bis 60" und einer maximalen Zuladung von bis zu 120,0 kg

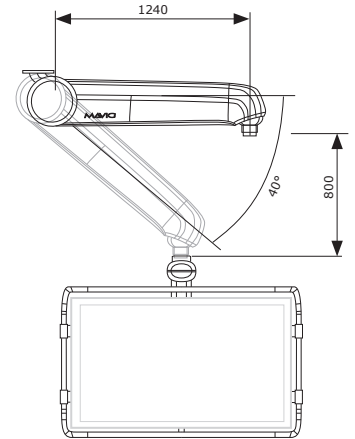

GD60 Abmaße: Basisvariante mit beiden Federarmausführungen (0° bis 40° bzw. +12° bis -28°; siehe unten)

ACHTUNG: Lassen Sie vor jeder Montage die Decke auf ausreichende Tragfähigkeit überprüfen!
Die Montage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.



GD60 Rückansicht

Artikel-Nr.:

GD60W
(individuell)

Das Monitorträger-System GD60 ist in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Die Basisversion ist mit Federarm und Monitorhalter für einen großen Monitor bis 60" bzw. 4 - 8 kleinere Monitore (mit Basis-Verkabelungsmöglichkeiten)

Made in Germany


GD60 – Vielseitiger Monitorträger für bis zu 8 Monitore

Die patentierte kardanische Aufhängung, der automatische Gewichtsausgleich, die leichtgängige Beweglichkeit und die integrierte Verkabelung sowie die einfache Montage verschiedener Monitorgrößen sind nur einige der vielen Glanzlichter, die den GD60 auszeichnen. Das System ist auf große Gewichte ausgerichtet – bis zu 120,0 kg / 264,5 lbs bewältigt es spielend.

Die Aufhängung erlaubt schnelle Bewegungen – wenn die Monitore im Notfall weichen müssen. Sie vermindert Reibungseffekte und verlängert die Lebenszeit des Trägersystems.

- **Fixpunkt-montiert**
- **Große Reichweite dank Federarmlänge von 1240 mm**
- **Hohe Zuladungen:** bis zu 120,0 kg / 264,5 lbs möglich
- **Monitoranzahl:** konfigurationsabh. 1 bzw. 4 - 8 Displays, Monitor- / Displaygrößen bis zu 60" möglich
- **Kardanische Aufhängung für Sicherheit bei Kollision**

Weitere spezifische Monitorhalter-Varianten des GD60, mit unterschiedlichen Rahmenkonstruktionen, Farben etc. (Kundenmodelle: GE, Siemens, Philips, Dräger ...) gerne auf Anfrage.

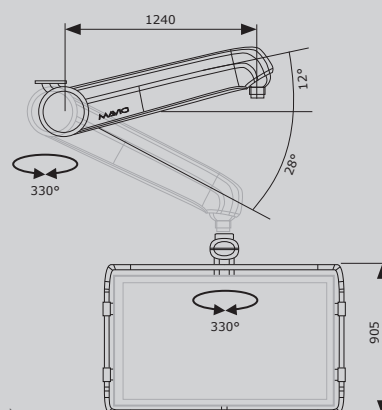

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com