

BRV500 BRV501



BRV500


Design
Universelle Größe
Unisex

Pb Wert (Gewicht)
BRV500 Pb 0.10 mm (ca. 525 g)
BRV501 Pb 0.10 mm (ca. 505 g)

MAVIG



BRV501

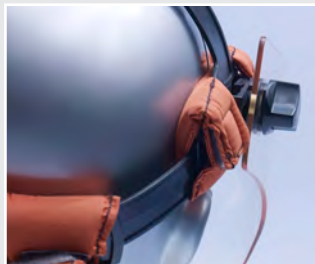

Universelle Größe

Artikel Codes: **BRV500** Vollflächige Abdeckung bis zum Kinn
BRV501 Abdeckung bis Wangenknochen (mit Aussparung für die Nase)

CE0123

Röntgenschutz-Visier – Designs BRV500 & BRV501

Speziell entwickelt für den Schutz von medizinischem Personal bei radiologischen Anwendungen. Optimal für den Schutz der Augenlinse gegen Röntgenstreustrahlung. Die Visiere ermöglichen eine starke Reduktion der Strahlenbelastung für die Augen und große Teile des Gesichtsfeldes (siehe Tabelle).

Die Qualitätsmerkmale unserer Visiere machen sie ideal für den Einsatz im medizinischen Umfeld:

- Zertifiziert gemäß 89/686/EWG Personenschutz-ausrüstung, Kategorie III
- Individuell einstellbare Größe und Passform
- Vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung an die persönliche Gesichtsgeometrie
- Einfach justierbar durch Drücken und Drehen des Pivot-Mechanismus, für rutschsicheren Sitz
- Komfortable, austausch- und waschbare Polsterung
- Gebogenes Bleiacrylglas mit Pb 0.10 mm
- Sorgfältig ausgewählte Materialien senken das Allergierisiko auf ein Minimum

Röntgenröhrenspannung	Streustrahlenschwächung
50 kV	96,9 %
60 kV	94,4 %
80 kV	86,3 %
100 kV	80,0 %
120 kV	75,0 %

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 / 420 96 – 0
Fax: +49 (0) 89 / 420 96 – 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com