


ST - Strahlenschutz-Abdeckungen



ST-FS5AMM

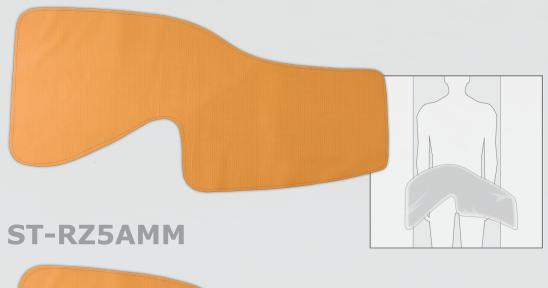

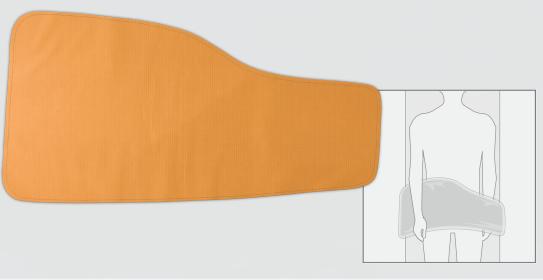

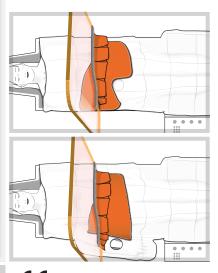

Modelle:

ST-FS5AMM STEA-FSAM ST-RZ5AMM STEA-RZAM

Strahlenschutz-Abdeckung mit Ausschnitt bei Zugang über A. femoralis * Box mit 50 sterilen Einwegbezügen für Strahlenschutz-Abdeckung ST-FS5AMM Strahlenschutz-Abdeckung bei Zugang über A. radialis * Box mit 50 sterilen Einwegbezügen für Strahlenschutzabdeckung ST-RZ5AMM

CE Made in Germany

DIN EN 61331-1 IEC 61331-1

Strahlenschutz-Abdeckungen: ST-FS5AMM & ST-RZ5AMM

Die Abdeckungen schützen den Untersucher optimal vor der aus dem Patientenkörper und unterhalb der Strahlenschutzscheibe austretenden Streustrahlung - beiUntersuchungen mit Zugang über die A. femoralis oder die A. radialis.

Die minimierte Größe der Abdeckungen gewährleistet bei gleichbleibend exzellentem Schutz für den Untersucher maximalen Komfort für den Patienten. Die spezielle Form der Abdeckungen ist jeweils auf den entsprechenden Verwendungszweck ausgelegt: mit Ausschnitt für femorale Punktion; ohne Ausschnitt für radiale Punktion (für geschlossenen Strahlenschutz). Gleichzeitig vermeidet der einzigartige Schnitt der Abdeckungen, dass diese beim Angulieren in den bildwirksamen Bereich kommen.

Sterile Einwegbezüge für die Abdeckungen erlauben eine Platzierung oberhalb der sterilen Patientenabdeckung. Sie gewährleisten eine schnelle und problemlose Entfernung in einer Notfallsituation sowie eine kontinuierliche Überwachung der Position der Abdeckung in Hinsicht auf den Durchstrahlungsbereich. Die sterilen Bezüge sind darüber hinaus wirtschaftlich und ökonomisch im Vorteil gegenüber Einweg-Strahlenschutzabdeckungen.

* inklusive einer Box mit 50 sterilen Einwegabdeckungen

ST-FS5AMM

- · Abdeckung mit Ausschnitt bei femoralen Zugang
- Bleigleichwert: Pb 0,50 mm

ST-RZ5AMM

- Bleigleichwert: Pb 0,50 mm
- Größe: 75 x 40 cm

MAVIG GmbH

Strahlenschutz und medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5 81829 München Deutschland

Postfach 82 03 62 81803 München Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0 +49 (0) 89 / 420 96 - 200 Fax e-Mail info@mavig.com

www.mavig.de