



Strahlenschutz-Abdeckungen

MAVIG


ST-FS5AMM

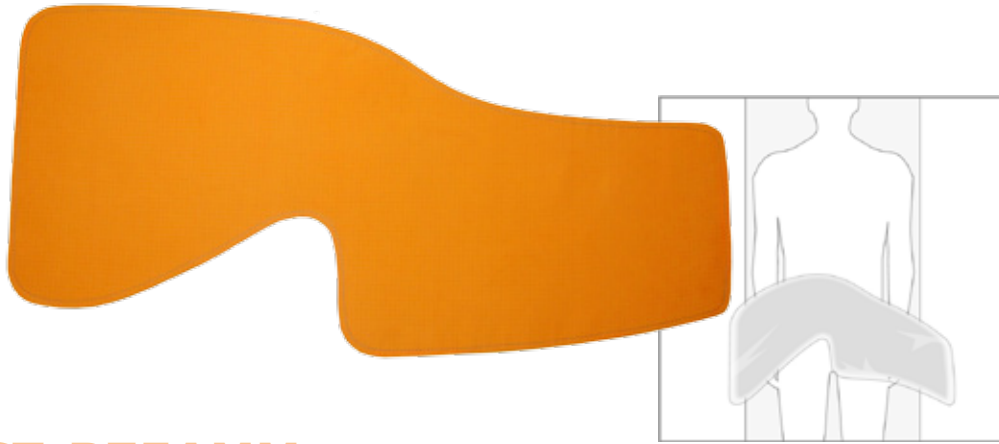

ST-RZ5AMM

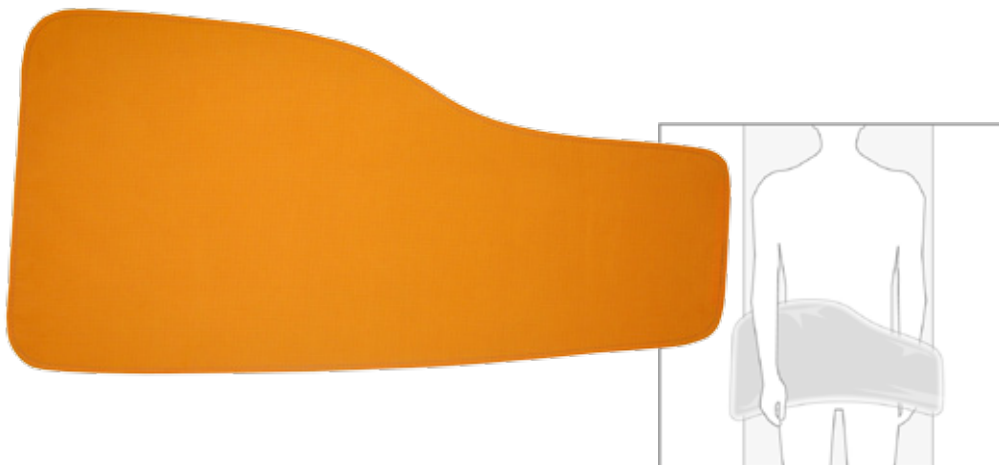

ST-FS5AMM	Strahlenschutz-Abdeckung mit Ausschnitt bei Zugang über A. femoralis *
STEA-FSAM	Box mit 50 sterilen Einwegbezügen für Strahlenschutz-Abdeckung ST-FS5AMM
ST-RZ5AMM	Strahlenschutz-Abdeckung bei Zugang über A. radialis *
STEA-RZAM	Box mit 50 sterilen Einwegbezügen für Strahlenschutzabdeckung ST-RZ5AMM

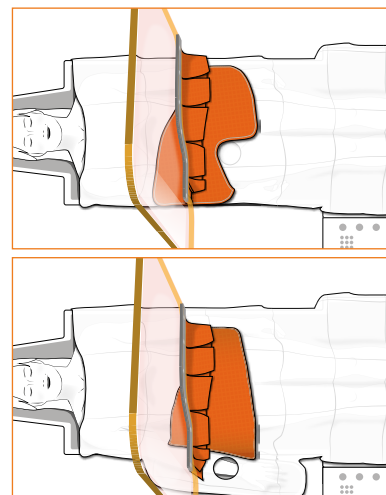

CE, DIN EN 61331-1, DIN 6857-1,
IEC 61331-1
Made in Germany

Strahlenschutz-Abdeckungen: ST-FS5AMM & ST-RZ5AMM

Durch jahrzehntelange Erfahrung ist es MAVIG gelungen, die für den Untersucher gefährliche Streustrahlung mittels neuartiger Abdeckungen zu minimieren. Die Abdeckungen schützen den Untersucher optimal vor der aus dem Patientenkörper und unterhalb der Strahlenschutzscheibe austretenden Streustrahlung - bei Untersuchungen mit Zugang über die A. femoralis oder die A. radialis.

Die minimierte Größe der Abdeckungen gewährleistet bei gleichbleibend exzellentem Schutz für den Untersucher maximalen Komfort für den Patienten. Die spezielle Form der Abdeckungen ist jeweils auf den entsprechenden Verwendungszweck ausgelegt: mit Ausschnitt für femorale Punktion; ohne Ausschnitt für radiale Punktion (für geschlossenen Strahlenschutz). Gleichzeitig vermeidet der einzigartige Schnitt der Abdeckungen, dass diese beim Angulieren in den bildwirksamen Bereich kommen.

Sterile Einwegbezüge für die Abdeckungen erlauben eine Platzierung oberhalb der sterilen Patientenabdeckung. Sie gewährleisten eine schnelle und problemlose Entfernung in einer Notfallsituation sowie eine kontinuierliche Überwachung der Position der Abdeckung in Hinsicht auf den Durchstrahlungsbereich. Die sterilen Bezüge sind darüber hinaus wirtschaftlich und ökonomisch im Vorteil gegenüber Einweg-Strahlenschutzabdeckungen.

ST-FS5AMM:

- Abdeckung mit Ausschnitt bei femoralen Zugang
- Bleigleichwert: Pb 0,50 mm
- Größe: 75 x 36 cm
- Gewicht: 1,31 kg

ST-RZ5AMM:

- Abdeckung bei radialen Zugang
- Bleigleichwert: Pb 0,50 mm
- Größe: 75 x 40 cm
- Gewicht: 1,56 kg

*inklusive einer Box mit 50 sterilen Einwegabdeckungen

MAVIG GmbH
Strahlenschutz
& Systemtechnik

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 420 96 - 0
Fax: +49 (0) 89 420 96 - 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com