


360°



Twin

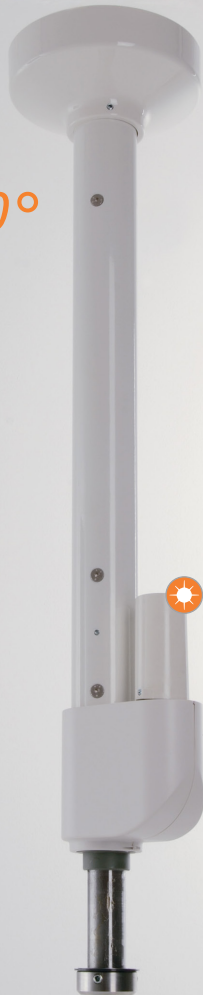

PORTEGRA²

Deckenstative für die Fixpunktmontage

TS2020 - 23 360° Fixpunktstativ (für Stativlänge bitte untenstehende Tabelle verwenden)
TS2001 - 05 Twin Fixpunktstativ (für Stativlänge bitte untenstehende Tabelle verwenden)



CE, IEC 60601-1
 Made in Germany

MAVIG Deckenstative – 360° und Twin

In punkto Sicherheit heben sie sich weit von bisherigen Lösungen ab. Viele Jahre Entwicklungsarbeit stecken in den stabilen, stählernen Stativen von MAVIG. Die vielfach bewährte Konstruktion, eine robuste Ausführung und umfangreiche Tests garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit beim täglichen Einsatz. Der patentierte MAVIG Deckenanker bietet zusätzliche Sicherheit. Bei unbeabsichtigter Lösung der Deckenbefestigung wird ein Herunterfallen des Systems verhindert.

MAVIG Portegra2 Stative sind serienmäßig mit einer elektrifizierten Aufnahme für Leuchten ausgestattet. Sollte eine Lösung mit zwei elektrifizierten Aufnahmen benötigt werden, so ist diese in Sonderanfertigung bei den Twin-Stativen möglich.

- Jede Aufnahme ermöglicht 240° Rotation (360° für die untere Aufnahme des 360° Stativs)
- Elektrifizierte Verbindung über 3-poliger Schleifkontakt ⚡
- Maximale Nutzlast am Ende des Federarms: 18,0 kg je Aufnahme
- Verschiedene Stativlängen zur Anpassung an die Raumhöhe

MAVIG GmbH
 Strahlenschutz
 & Systemtechnik

Stahlgruberring 5
 81829 München
 Deutschland

Postfach 82 03 62
 81803 München
 Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 420 96 – 0
 Fax: +49 (0) 89 420 96 – 200
 e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com

Artikel-Nr. 360°	Länge*	Artikel-Nr. Twin	Länge*
TS2020	1000 mm	TS2001	1000 mm
TS2021	850 mm	TS2002	850 mm
TS2022	650 mm	TS2003	580 mm
TS2023	580 mm	TS2004	650 mm
		TS2005	460 mm

* Deckenstativlängen sind
 Kompletต์maße, gemessen
 an den äußersten Punkten.