

DE

UT6030 / UT6031 / UT6032

(7,7 x 25 mm Zubehörschiene)

(9 x 25 mm Zubehörschiene)

(10 x 25 mm Zubehörschiene)

Ein erweitertes Design
für eine deutlich vergrößerte Schutzzone



MAVIG

UT6030 / UT6031 / UT6032

(7,7 x 25 mm Zubehörschiene)

(9 x 25 mm Zubehörschiene)


(10 x 25 mm Zubehörschiene)

Untertisch-Streustrahlenschutz ist für Untersucher und Assistenzpersonal eine unerlässliche Schutzeinrichtung und seit langem ein etablierter Standard an Arbeitsplätzen der interventionellen Radiologie.

Smarte Strahlenschutz-Systeme

Seit vielen Jahrzehnten ist MAVIG erste Wahl bei Untertisch-Streustrahlenschutz. Die hochwertigen und stabilen Systeme sind optimal für den Alltags Einsatz im klinischen Betrieb ausgelegt. Sie bieten ein Maximum an Sicherheit bei hoher Flexibilität.

Unser Life Cycle Testing sorgt für 100-prozentige Qualität aller ausgelieferten Produkte. MAVIG Unterkörperschutz-Systeme sind CE gekennzeichnet und das Unternehmen MAVIG selbst ist vom TÜV Produkt-Service gemäß ISO EN 13485 zertifiziert.

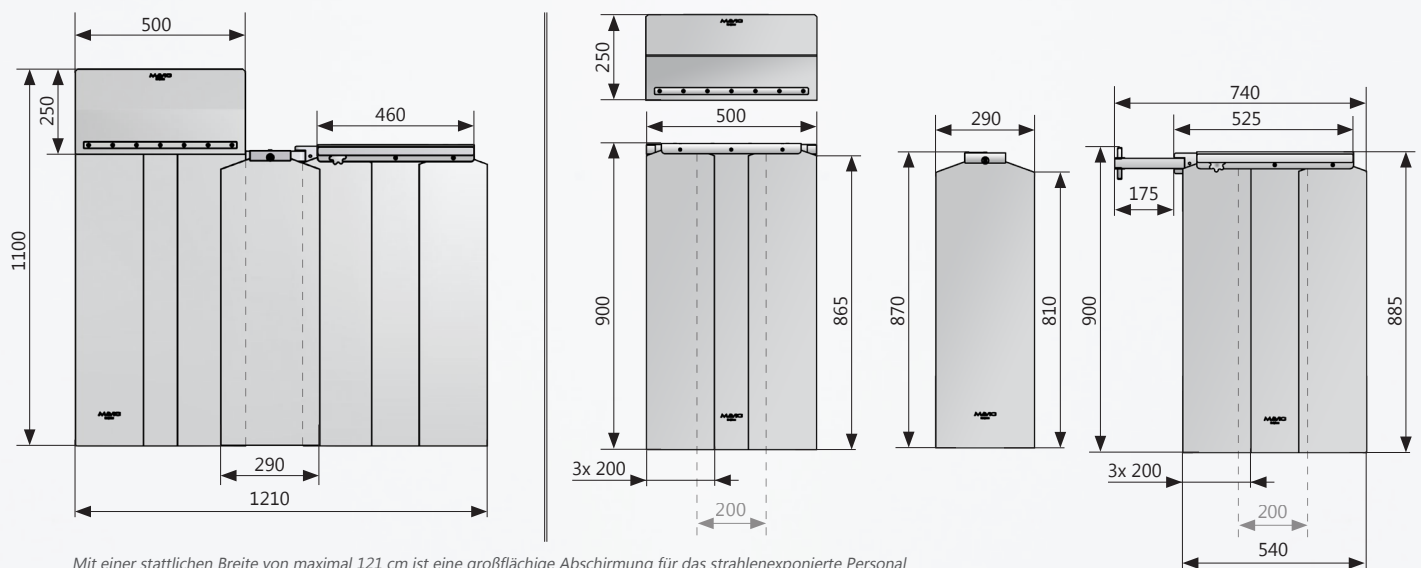

Mit einer stattlichen Breite von maximal 121 cm ist eine großflächige Abschirmung für das strahlenexponierte Personal auf der jeweiligen Tischseite mit einer Bleigleichwert von Pb 0,50 mm sichergestellt.

Erweiterte Schutzzone

Um für Untersucher und Assistenzpersonal eine deutlich größere Schutzzone vor Röntgen-Streustrahlung zu schaffen hat MAVIG, aufbauend auf Bewährtem, den Unterkörperschutz der weltweit erfolgreichen Baureihe UT60 mit einem erweiterten Design ausgestattet.

- Die flexiblen, sich überlappenden Lamellen ermöglichen mehr Komfort für den Untersucher und eine ungestörte Bewegung des C-Bogens
- Schwenkbare Lamellen zur Anpassung an eine mögliche Neigung des Tisches bis zu 15°
- Inklusive Obertisch-Streustrahlen-Aufsatz für das 500 mm breite Unterteil
- Doppelgelenk-Adapter mit Zusatzlamelle für eine flexible Positionierung
- Passend für Tischschienen mit Profilen von 7 x 25 mm bis 10 x 30 mm
- Zusätzliche 460 mm lange Zubehörschiene (UT6030: 7,7 x 25 mm, UT6031: 9 x 25 mm oder UT6032: 10 x 25 mm), z.B. für die Befestigung von Bedienelementen bis maximal 15,0 kg
- Stabile Konstruktion und gerundete Kanten verringern Verletzungsrisiken
- Optimierte Oberflächen für gründliche und zeitsparende Hygiene
- Jede Schutzkomponente mit einem Bleigleichwert von Pb 0,50 mm
- Inklusive Wandaufhängungen für den Aufsatz und das 500 mm breite Unterteil



Schwenkbare Lamellen