

Balance RA631

RUNDUMSCHUTZ WESTE & ROCK

Einer Belastung des Körpers durch Wärme oder Gewicht wird mit der zweigeteilten Ausführung bestmöglich entgegengewirkt.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei




Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei

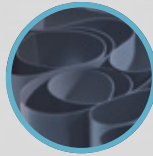

Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

- ✓ komplett sich überlappende Vorderteile erzielen den gewählten Bleigleichwert frontseitig
- ✓ ideale Passform und erstaunlicher Tragekomfort
- ✓ geeignet für lange Tragezeiten
- ✓ deutliche Reduktion der Gewichtsbelastung für die Wirbelsäule
- ✓ Serienausstattung beinhaltet Schulterpolster
- ✓ im unteren Bereich ist der Rock außerdem mit einem Schnappverschluss gesichert
- ✓ Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

*Optional kann die Weste, wie am Modell gezeigt, mit einem **anknüpfbaren Stretchgürtel** versehen werden. Dieser sorgt für eine noch bessere Gewichtsentlastung der Schultern und Unterstützung des Rückens.*

*Zusätzlich ist für das Kostüm die Kombination mit unserem Schulterentlastungssystem **BRYGGA** möglich.*



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm,	Taillen-/Hüftumfang ≤ 86 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 87 - 97 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 98 - 107 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 108 - 118 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 119 - 129 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 130 - 140 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 141 - 151 cm

* Da das Modell RA631 aus zwei Teilen besteht gilt das Folgende:
Für die Westengröße entscheidet der größere Wert bei Brust und Taille.
Für die Rockgröße entscheidet der größere Wert bei Taille und Hüfte.



Patentierte Sicherheit

Idealen Strahlenschutz gewährleisten seitlich und in der Schulterpartie eingearbeitete, farblich (in Titan) abgesetzte Sicherheitszonen. Diese sind mit dem vollen Bleigleichwert des Frontteils ausgestattet und geben Ihnen die Gewissheit, in allen Situationen bestmöglich geschützt zu sein.

Wenn sich der Frontflügel bei geschlossener Schutzkleidung innerhalb dieser deutlich erkennbaren Zone befindet, dann decken Sie die vollen 60% des Körperrumfangs mit dem ausgewählten Schutzwert ab.

Levio® 
Optimiertes Schutzkonzept



Elastischer Einsatz

Dieser macht es in der Rückenpartie des Rockes, Haltung zu bewahren und kann bei Bedarf dank Reißverschluss einfach ausgetauscht werden.

Hochwertige Klettverschlüsse zum Schließen von Weste und Rock sind natürlich Standard.



BRYGGA Schulterentlastung



Outlast Temperaturregulierung

Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist farblich deutlich erkennbar.

Rückenentlastung

Der elastische Einsatz im Rücken beim Rock ermöglicht es in der täglichen Routine leichter Haltung zu bewahren.

Freie Bewegung

Für mehr Bewegungsfreiheit ist beim Rock hinten ein Ausschnitt eingearbeitet. Selbstverständlich sind hierbei die Knie immer noch optimal von vorne und seitlich geschützt.

Überlappungsbereich

Damit der Schutz auch bei Bewegung (z.Bsp. Bücken) gegeben ist, verfügt die Weste über eine ausreichende Länge und überlappt zum Rock hin.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Rocklängen / Körpergröße:
65 cm / 150 - 170 cm
70 cm / 170 - 180 cm
75 cm / 180 - 190 cm
80 cm / 190 - 200 cm

Optional



Auf Wunsch:
Outlast Inlay
BRYGGA
Ärmel
Stretchgürtel (außen)
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz



Streckeinsatz:
(Adaption via
Reißverschluss)
Stretchgürtel:
(Adaption via
Druckknöpfe)