

Synergy RA632

RUNDUMSCHUTZ MANTEL

Zum besonderen Komfort zählt das bequeme und unkomplizierte Anlegen. Der Mantel wird einfach mit einem Klettverschluss auf Brusthöhe geschlossen und sitzt auf Antrieb korrekt.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

- ✓ komplett sich überlappende Vorderteile erzielen den gewählten Bleigleichwert frontseitig
- ✓ ideale Passform, höchster Tragekomfort
- ✓ kontinuierliche Unterstützung durch den elastischen Stretchgürtel (im Lieferumfang enthalten)
- ✓ Serienausstattung beinhaltet Schulterpolster
- ✓ im unteren Bereich ist der Mantel außerdem mit einem Schnappverschluss gesichert
- ✓ Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Für eine zusätzliche Entlastung der Schultern kann der Mantel mit unserem Schulterentlastungssystem **BRYGGA** kombiniert werden.



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 98 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 99 - 108 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 109 - 119 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 120 - 130 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 131 - 141 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 142 - 152 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 153 - 163 cm


* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



Sicherheit in der Passform

Farblich (in Titan) abgesetzte Sicherheitszonen geben Ihnen die Gewissheit, in allen Situationen bestmöglichen Schutz zu haben.

Wenn sich der Frontflügel bei geschlossener Schutzkleidung innerhalb dieser deutlich erkennbaren Zone befindet, dann decken Sie die vollen 60% des Körperrumfangs mit dem maximalen Schutzwert ab.

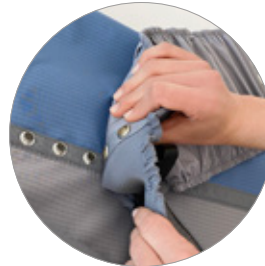

Druckknopfleiste

Eine optimale Ausrichtung des Gürtels auf Ihre Taillenhöhe gewährleistet die praktische Druckknopfleiste des Gürtels. Damit kann dieser variabel in der Höhe angebracht und sowohl einseitig als auch beidseitig am Mantel angeknöpft werden.



BRYGGA Schulterentlastung



Outlast Temperaturregulierung

Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist farblich deutlich erkennbar.

Sicherheitszone

Diese Zone (farblich in Titan) gewährleistet ein risikofreies, lückenloses und sicheres Schließen des Mantels RA632.

Rückenentlastung

Der breite, elastische Stretchgürtel ermöglicht in der täglichen Routine leichter Haltung zu bewahren.

Freie Bewegung

Für mehr Bewegungsfreiheit ist beim Mantel hinten ein Ausschnitt eingearbeitet.

Selbstverständlich sind hierbei die Knie optimal von vorne/seitlich geschützt.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid


Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Mantellänge / Körpergröße:
90 cm / 150 - 160 cm
100 cm / 160 - 170 cm
110 cm / 170 - 180 cm
120 cm / 175 - 190 cm
130 cm / 185 - 195 cm
140 cm / 195 - 205 cm

Optional

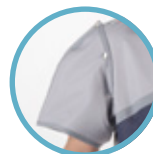

Auf Wunsch:
Outlast
BRYGGA
Ärmel
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz



Stretchgürtel:
(Adaption via
Druckknöpfe)