

DE

MAVIC

BR125

Overfit – Röntgenschutz-Brille

MAVIC

Technische Daten und Spezifikationen



BR125 Die erste Röntgenschutz-Overfitbrille, die einen erweiterten Schutz für die Augen bietet.



- Spezielles Design für einen spaltfreien Schutz vor Streustrahlung
- Dichter Abschluss an den Wangenknochen bis zu den Schläfen




- Strahlenschutz-Seitenteile (Bleifrei) aus dem Kunststoff-Compound „Trielle“
- Patentierte Zusammensetzung, Bleigleichwert 0,50 mm Pb
- Normkonform nach IEC 61331-1:2014



- Längenverstellbare Bügel (5 Stufen) für eine perfekte Passform und angenehmen Sitz

Eines der Merkmale der BR125 sind die großen Röntgenschutzgläser für ein weites Sichtfeld und den zusätzlichen Bereich bei Strahlung von schräg unten.

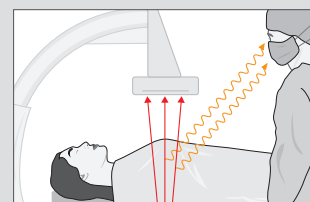

Streustrahlung trifft nicht nur frontal auf die Augenlinsen, sondern aus verschiedenen Winkeln – sowohl von unten wie von den Seiten.


Aus diesem Grund haben wir die Röntgenschutzbrille BR125 entwickelt, die einen umfassenden, spaltfreien Schutz gewährleisten kann.

Besondere Qualitätsmerkmale optimieren den Einsatz im medizinischen Bereich

- ✓ **Superentspiegelte Gläser für entspanntes und ermüdungsfreies Sehen**
- ✓ **Fassung aus leichten, erstklassigen Werkstoffen mit großer Formbeständigkeit**
- ✓ **Allergiefreiheit durch hochwertiges Kunststoffmaterial**
- ✓ **Formgebung und Material unterstützen die Vermeidung von Verletzungsrisiken**
- ✓ **Leichte Reinigung und sehr guter Widerstand gegenüber chemischen Einflüssen** (Desinfektionsmittelbeständigkeit)

Optische Korrekturen sind bei dieser Baureihe leider nicht möglich.

Modell	BR125
Farbdesigns	Sahara, Flint Stone
Größe	Universell / Einheitsgröße
Bleigleichwert - Frontschutz/Glas (50 - 150 kV)	0,50 mm Pb
Bleigleichwert - Mittelteil/Seitenschutz (50 - 150 kV)	0,50 mm Pb
Gewicht (plano)	ca. 140 g (0,50 mm Pb)
Entspiegelung der Gläser	✓
Brillenband / Brillenetui / Brillenputztuch	✓ / ✓ / ✓
Reinigung / Desinfektion	✓ / ✓
Konformität: IEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014	✓ / ✓

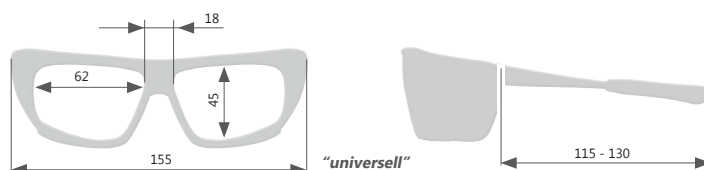

MAVIG GmbH

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

www.mavig.de