



Victoria RA636

RUNDUMSCHUTZ: MANTEL SPEZIELL FÜR DIE WEIBLICHE FIGUR

Zum besonderen Komfort zählt das bequeme und unkomplizierte Anlegen. Der Mantel wird einfach mit einem Klettverschluss geschlossen und sitzt auf Antrieb korrekt.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

- ✓ Strahlenschutz-Mantel speziell für Frauen
- ✓ Ideale Passform, höchster Tragekomfort
- ✓ Keine volle Überlappung frontseitig notwendig
- ✓ Kontinuierliche Unterstützung durch den elastischen Stretchgürtel (Breite 10 cm, im Lieferumfang enthalten)
- ✓ Serienausstattung beinhaltet Schulterpolster
- ✓ Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Für eine zusätzliche Entlastung der Schultern kann der Victoria Mantel mit unserem Schulterentlastungssystem **BRYGGA** kombiniert werden.



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 98 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 99 - 108 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 109 - 119 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 120 - 130 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 131 - 141 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 142 - 152 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 153 - 163 cm

* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



RUNDUMSCHUTZ: MANTEL SPEZIELL FÜR DIE WEIBLICHE FIGUR

VICTORIA RA636

**Weltweit
einzigartig!**


Die Victoria-Kollektion ...

... repräsentiert mehr als nur Schutz – sie verkörpert eine moderne, durchdachte und auf die Bedürfnisse der weibliche Anatomie zugeschnittene Lösung. Machen Sie sich bereit für innovativen Röntgenschutz der nächsten Generation.

Mit speziell angepassten Armausschnitten bietet der Mantel Victoria RA636 einen idealen Schutz des sensiblen Brustgewebes, ohne Kompromisse bei der Bewegungsfreiheit einzugehen.

Prinzessnähte (Längsteilungsnähte für einen körpernahen Schnitt) auf der Vorderseite gewährleisten eine ideale Anpassung, während ein Stretcheinsatz im Rückenbereich für eine optimale Passform sorgt.

Entdecken Sie die neue Fusion aus Funktionalität und Stil, die Sicherheit und ästhetisches Design in Einklang bringt, um den Bedürfnissen und Ansprüchen von Frauen in der interventionellen Radiologie gerecht zu werden.

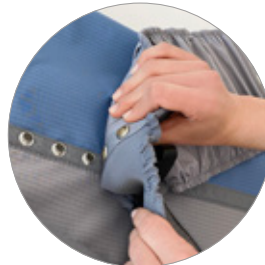

Druckknopfleiste

Eine optimale Ausrichtung des Gürtels auf Ihre Taillenhöhe gewährleistet die praktische Druckknopfleiste des Gürtels.

Damit kann dieser variabel in der Höhe angebracht und sowohl einseitig als auch beidseitig am Mantel angeknöpft werden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass an den Victoria-Mantel auf Grund der angepassten Armausschnitte keine Ärmel angebracht werden können. Bitte kombinieren Sie den Victoria-Mantel mit dem MAVIG Bolero RA637.

Levio®
Optimiertes Schutzkonzept



BRYGGA Schulterentlastung



Outlast Temperaturregulierung

Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist farblich deutlich erkennbar.

Optimierte Armausschnitte

Idealer Schutz des sensiblen Brustgewebes

Teilungsnähte im Vorderteil

Für eine gute Passform aber mit vollem Strahlenschutz

Freie Bewegung

Für mehr Bewegungsfreiheit ist beim Mantel hinten ein Ausschnitt eingearbeitet.

Selbstverständlich sind hierbei die Knie optimal von vorne/seitlich geschützt.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Mantellänge / Körpergröße:
90 cm / 150 - 160 cm
100 cm / 160 - 170 cm
110 cm / 170 - 180 cm
120 cm / 175 - 190 cm
130 cm / 185 - 195 cm
140 cm / 195 - 205 cm

Optional



Auf Wunsch:
Outlast®
BRYGGA®
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz



Stretchgürtel:
(Adaption via
Druckknöpfe)